


Zlaté elektródy Vysoká presnosť

Presnosť výsledkov

Jednotlivé výsledky namerané SD Check™ meracím systémom boli porovnávané Clarkeovou analýzou chybových mriežok s referenčnými hodnotami YSI.

Clarkeova chybová mriežka je rozdelená do 5 zón. Každá zóna predstavuje význam chyby vo výsledku merania glukózy ako súvisí s klinickým rozhodnutím založeným na výsledkoch merania.

Clarkeova analýza chybových mriežok

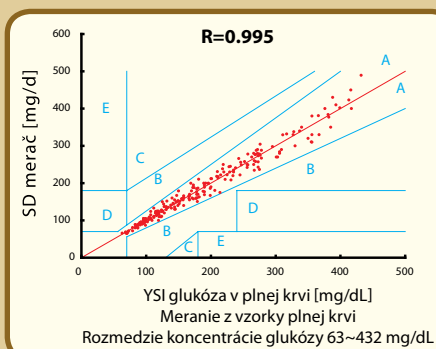

Zóna A: Žiadny vplyv na klinickú činnosť


Zóna B: Malý, alebo žiadny vplyv na klinické výsledky

Zóna C: Pravdepodobnosť vplyvu na klinické výsledky

Zóna D: Možnosť vysokého zdravotného rizika

Zóna E: Možnosť nebezpečného vplyvu

„Vysoko kvalitné výrobky
s vysokou presnosťou,“

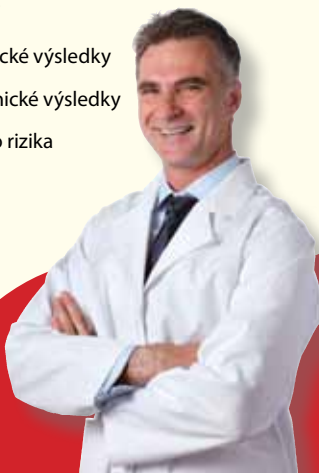

Zlaté elektródy Vysoká presnosť

Ďalšie informácie o výrobkoch

SD Check™ GOLD **SD Codefree™**

získate od nášho obchodného zástupcu

CELIMED s.r.o., alebo na www.celimed.sk

Obchodné zastúpenie pre SR:

CELIMED s.r.o.

Hagarova 4, 831 52 Bratislava

www.celimed.sk



V predaji v lekárnach a zdravotníckych potrebách

Kódy ZP

Kód č.: Popis výrobku:

D83142 Merač krvnej glukózy SD Check Gold

D83143 Prúžky testovacie SD Check Gold

Merač aj prúžky SD Check Gold sú plne hrazené zo ZP

D86459 Merač krvnej glukózy SD Code Free

D86433 Prúžky testovacie SD Code Free

D85586 Lanceta SD
(jednorázová ihla / lanceta na odber kapilárnej krvi)

MERAČE KRVNEJ GLUKÓZY



SD Check GOLD




SD CodeFree




Zlaté elektródy Vysoká presnosť

Výhody meracieho prúžku

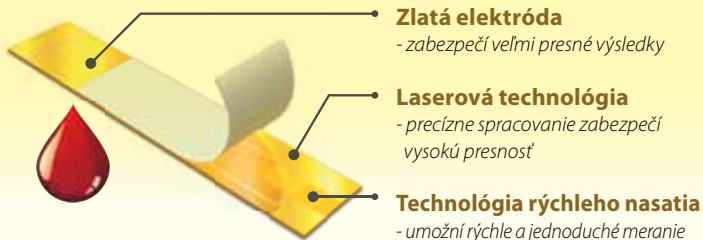

Zloženie glukózooxidázy

Zloženie glukózooxidázy nereaguje s inými glukózami v krvi, ako napr. icodextrín, maltóza a preto sa môžete na tento test spoľahnúť.

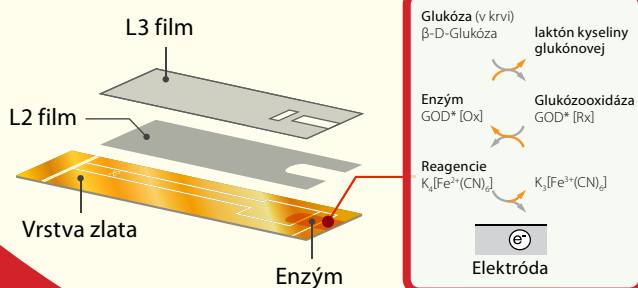

SD **CHÉCK** GOLD



SD **Codefree**



Popis výrobku:

SDCHÉCK™ GOLD

- Rýchle 5 sekundové meranie
- Malá vzorka krvi 0,9 μl
- Automatická kontrola expirácie
- Pamäť na 400 výsledkov meraní
Jednoduchá kontrola predchádzajúcich meraní, označených dátumom a časom.
- Veľký ľahko čitateľný displej
Na zobrazenie výsledku vrátane dátumu a času.
- Priemery výsledkov meraní za 7, 14 a 30 dní
Poskytne používateľovi viac údajov pre lepší prehľad.
- Jednoduché vloženie meracieho prúžku
Ľahké a jednoduché vloženie prúžku do prístroja.
- 10 000 meraní (po sebe nasledujúcich), dlhá životnosť batérie
Merač má minimálnu spotrebu elektrickej energie, dlhá životnosť batérie.



Výhody kódovacieho čipu

- **Automatické nastavenie pri zmene teploty**
• Senzor zabezpečí presné meranie pri zmene teploty.
- **Kódovací čip**
• Zabezpečí aktuálne dáta pre každé balenie prúžkov.
- **Automatická kontrola expirácie meracieho prúžku**
• Zabezpečí presné a spoľahlivé výsledky.

Popis výrobku:

SD **Codefree™**

- **Autokódovací merač** (bez kódovacieho čipu)
- **Označenie symbolom „pred jedlom“ a „po jedle“**
Pre jasnejší prehľad nameraných výsledkov.
- **Alarm pre meranie po jedle**
Upozorní vás na meranie 2 hodiny po jedle.
- **Upozornenie na hypoglykémii**
Upozorní vás na nízku hladinu glukózy a možnosť hypoglykémie.
- **Alarm**
Možnosť nastavenia 4 časových alarmov.
- **Diabetes Management Software**
Jednoduché stiahnutie dát cez USB pripojenie do PC.
- **Priemery výsledkov meraní za 7, 14 a 30 dní z hodnôt pred/po jedle**
Poskytne používateľovi viac údajov pre lepší prehľad.
- **Pamäť na 500 výsledkov meraní**
Jednoduchá kontrola predchádzajúcich meraní, označených dátumom a časom.



SD DMS (Diabetes Management Software v. 1.0)

Program SD Diabetes Management Software umožní ukladať a ďalej pracovať s nameranými výsledkami krvnej glukózy. V prehľadných grafoch môžete jednotlivé hodnoty porovnávať a vyhodnotiť. Tento program vám pomôže lepšie kontrolovať váš zdravotný stav a diabetes.

Jednoduché ovládanie programu v PC
Ľahko zrozumiteľné prehľady dát, možnosť ďalšieho spracovania

Užitočné hlásenia vrátane farebne spracovaných grafov

